



Гидромассажер
FIZZY XL



Инструкция по эксплуатации

Компания "ЭкоДомус"
Москва, Озерковская наб., д.48/50, стр.2, оф.3,
тел. 953-91-06, 953-91-82, e-mail: ekodomus-moscow@mail.ru




Инструкция по эксплуатации FIZZY XL

Внимательно прочитайте инструкцию для получения максимальной выгоды для вашего здоровья!

FIZZY XL – это великолепный гидромассажер, превращающий любую ванну не только в суперджакузи, но и в оздоровительный водный комплекс прямо у Вас дома без каких-либо дополнительных приспособлений. Генератор озона вместе с турбокомпрессором производит озон, который при контакте с водой образует «рождающийся кислород». Кислород быстро достигает кровеносных сосудов через расширенные поры кожи человеческого тела, находящегося в теплой воде. Часть озона поднимается на поверхность воды с воздушными пузырьками и хорошо усваивается через дыхательные пути. Растительные и минеральные вещества, добавленные в воду, будут лучше усваиваться благодаря действию массажа с кислородом.

FIZZY XL – это простота в использовании: благодаря гибкой поверхности коврика можно использовать его в любой ванне. Удобный и совершенный, FIZZY XL полностью безопасен, т.к. разработан в соответствии с международными стандартами по технике безопасности: ни одна из электрических частей не контактирует с водой, соединительные трубки сделаны из пластика, не проводящего электрический ток. FIZZY XL может быть размещен горизонтально на подставке или полу, а также может быть установлен на стене с использованием специального крепления и винтов. При креплении аппарата FIZZY XL на стене проверьте, чтобы рекомендации по безопасности, указанные на рис.1 были выполнены.

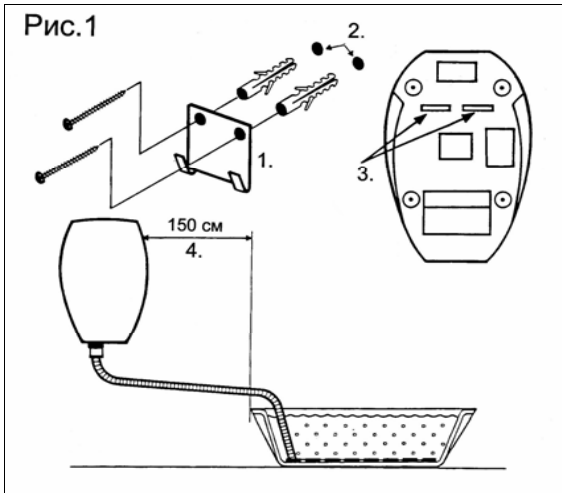

Турбокомпрессор подает до 2400 литров воздуха в минуту. Воздух и озон по шлангу доходят до коврика, находящегося на дне ванны, и выходят из 200 отверстий в виде пузырьков. FIZZY XL позволяет регулировать подачу озона, интенсивность и длительность

Гарантия продавца

Покупатель

Ф.и.о.	
Договор	№ аппарата
Наимен. товара	

Продавец

--

Условия гарантии.

1. Гарантия распространяется на все составные части аппарата.
2. Гарантийный срок определяется с момента передачи аппарата покупателю и заполнения настоящей гарантии.
3. Гарантийный срок на аппарат составляет: 1 (один) год с даты покупки.
4. Под гарантией продавца подразумевается бесплатное устранение дефектов или неисправностей, возникших по вине производителя в течении гарантийного срока. Покупатель так же может получить бесплатные консультации по пользованию аппаратом и уходу за ним
5. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине покупателя, в следствии не выполнения правил эксплуатации и ухода за аппаратом, описанных в настоящем руководстве по эксплуатации.

ВНИМАНИЕ!

В случае поломки не пытайтесь разобрать прибор, а свяжитесь с представителем фирмы ЭкоДомус.

Подпись покупателя _____

Подпись продавца _____

М.П.

Претензии по гарантии принимаются продавцом при наличии у покупателя настоящей гарантии.

Технические данные

- Напряжение: 230V~50Hz
- Мощность: 800 W
- Габариты аппарата: 28x46x23 см
- Размер массажного коврика: 31x110 см
- Длина гофрированной трубки: 200 см
- Вес аппарата: 5,6 кг
- Вес коврика: 2 кг.
- Воздушный поток: 2400 л/мин. При 52°C (прибл.)
- Сила потока воздуха: max H₂O - 500mm
- Производство озона: 0,03 ppm (макс) (60 µg/m³)
- Общий вес в упаковке 9,300 кг

массажа (от 0 до 30 минут). Рекомендуемая продолжительность массажа – 15-20 минут при температуре воды 36° – 38°C.

Крепление FIZZY XL на стену:

1. Устройство (пластина), которая должна крепиться к стене.
2. Отверстия в стене (диаметр 8 мм).
3. Отверстия, за которые FIZZY XL вешается на пластину, прикрепленную к стене.
4. Безопасное удаление прибора от ванны с водой.

Лечебное воздействие FIZZY XL

- **Ревматизм, артрит:** дезинфицирующее и антибактериальное действие озона вместе с деликатным водным массажем имеет значительный обезболивающий эффект.
- **Дыхательные пути и нервная система:** ингаляция воздухом с озоном в процессе гидромассажа оказывает общее положительное действие на организм для тех, кто страдает астмой, бессонницей, отсутствием аппетита и астенией.
- **Циркуляция крови:** «доставка» кислорода вглубь тела при гидромассаже усиливает кровообращение, расширяет капилляры и способствует избавлению тела от шлаков.
- **Кожа:** озон, дозированный в FIZZY XL, обогащает кожу кислородом, дезинфицирует и глубоко очищает ее, разглаживает от морщин, способствует устранению прыщей, угрей и экземы. FIZZY XL способствует заживлению ран и имеет дезинфицирующее и противогрибковое действие при гинекологических и других инфекционных заболеваниях.
- **Расслабление и отдых:** приятный расслабляющий массаж эффективно снимает физическую усталость, что обусловлено ускоренным усваиванием кислорода через кожу. Это тонизирует, успокаивает и освежает тело и голову и создает «усыпляющий эффект».
- Все это приводит к **психической стабильности**, устранению усталости, сбалансированности нервно-вегетативной системы и снижению «усталости мышления».
- **Красота:** FIZZY XL великолепное средство для людей, страдающих нарушением обмена веществ (ожирение и целлюлит), т.к. он позволяет «растворять» слой жира, который накапливается в подкожной ткани, благодаря глубокой очистке с помощью кислорода.

ткань, и направление массажа этих зон (см. рисунок).

Насадка-массажер для ног (фото. №3)


В отличие от предыдущих насадок, эта насадка не работает одновременно с системой гидромассажа в ванне. Массаж ног был придуман, чтобы объединить пользу от массажа с озоном, давая при этом облегчение усталым ногам, и стимулируя их кровообращение, особенно части ног ниже коленей, на которые опирается вес всего тела, нуждающихся в отдыхе в течение нескольких часов. После того, как подержали ноги от 10 до 20 минут в воде при работе массажера, исчезает усталость. Насадка не имеет никаких противопоказаний.

Правила техники безопасности

Изготовитель несет ответственность за безопасность FIZZY XL только, если прибор подключен к электрической системе, которая соответствует международным стандартам и если аппарат используется в соответствии с инструкциями изготовителя.

1. Не погружать аппарат в воду
2. Если FIZZY XL не работает, отсоедините его от электросети.
3. Используйте FIZZY XL только для выполнения тех функций, которые указаны в настоящей инструкции.
4. Никогда не оставляйте включенный аппарат без присмотра.
5. Перед использованием FIZZY XL должен быть правильно собран.
6. Никогда не разбирайте сами блок двигателя.
7. При использовании FIZZY XL детьми необходим контроль взрослых.
8. Тянуть за электрический шнур для передвижения FIZZY XL не допускается.
9. Не производите подключение электрических разъемов мокрыми руками, или если находитесь босыми ногами в воде.
10. Все работы по очистке аппарата нужно проводить при условии отключения от электросети.
11. Для очистки FIZZY XL не используйте едкое дезинфицирующее средство. Массажер не требует специального обслуживания.

- При направлении отверстий вниз – режим массажа щадящий.
- При направлении отверстий под углом (рекомендуемое положение) режим промежуточный (см. иллюстрацию).

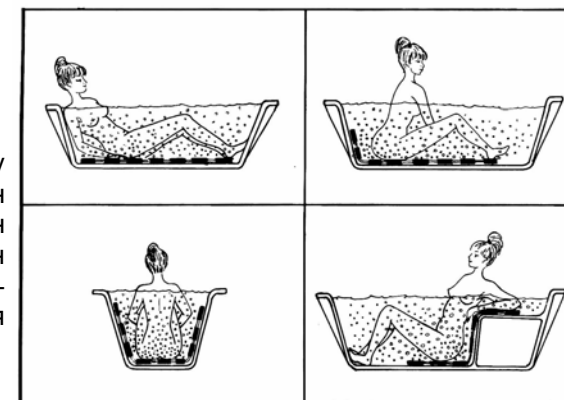

Благодаря гибкому строению коврика, он может быть размещен любом типе ванны. Он может также использоваться для проведения местного массажа.

Подготовка и использование FIZZY XL

1. Укладывая массажный коврик в основании ванны, проверьте, чтобы присоски были хорошо прикреплены.
2. Присоедините один конец гибкого шланга к коврику или к насадке, а другой к агрегату FIZZY XL.
3. Проверьте, что питание электрической розетки имеет характеристику мощности, указанную на табличке агрегата, а затем только подключите агрегат к розетке.
4. Заполните ванну водой. Рекомендуемая температура 36° – 38°C.
5. Прежде чем лечь в ванну, поверните регулятор озона на агрегате в желаемое положение (рекомендуемое положение «2»).
6. Поверните ручку таймера по часовой стрелке и выберите желаемое время.
7. Поверните ручку регулировки оборотов к «+» или «-», чтобы выбрать необходимую силу массажа.

Наслаждайтесь полезным массажем FIZZY XL!

8. По завершении работы, FIZZY XL остановится автоматически. Длительность работы зависит от установленного пользователем времени.
9. Отсоедините гибкий шланг от агрегата FIZZY XL перед тем, как доставить коврик из ванны.
10. Освободите ванну, отсоединив коврик от ее основания.



Рекомендуемый цикл состоит из 15 массажей, которые прерываются каждый 10-ый день перед тем, как начать следующий цикл. Каждый сеанс массажа с FIZZY XL должен длиться приблизительно 15-20 минут.

ВНИМАНИЕ! Перед тем, как доставать коврик из ванны, отсоедините гибкий шланг от агрегата FIZZY XL. После массажа для закрепления полученного эффекта рекомендуется немного отдохнуть.

Использование насадок FIZZY XL

Научные исследования, выполненные в самое последнее время, в разработке и изучении прибора привели к открытию новых выгод при эксплуатации FIZZY XL. Это эффект достигается при объединенном воздействии озона и массажа, с использованием дополнительных насадок. Вот некоторые рекомендации.

Насадка для груди и лица (фото. №1а, 1б)

Эта насадка сконструирована специально для подключения к массажеру. Она подходит для любого типа груди и обеспечивает це-

ленаправленный массаж, основанный непосредственно на тех же принципах, что и общий гидромассаж.

Настройка: Разместите коврик в основании ванны, наполните ванну водой оптимальной температуры. Соедините специальный T-образный переходник с ковриком. Присоедините шланг к массажному агрегату, один конец шланга присоедините к переходнику, другой – к насадке.

Метод использования: Заполните водой насадку для груди, зачерпнув воды из ванны, и начинайте массаж. Обрабатывайте каждую грудь приблизительно 5-7 минут, маленькие отверстия внутри насадки несут тысячи озонирующих крошечных пузырьков воздуха. Повышение количества пузырьков ведет к восстановлению кровообращения и лимфы, восстанавливая естественный вид, мышцы груди и оздоравливая кожу. Это помогает подтягиваться и молодеть коже, а также замедляет процесс естественного старения. Насадка для массажа груди универсальна и не имеет никаких противопоказаний. Она может также эффективно использоваться для массажа лица. Кожа становится более свежей, гладкой и нежной. Чтобы усилить эффект лицевого массажа, растворите приблизительно 300г соли или немного йода в ванне и зачерпните часть этой воды в насадку. Затем окуните лицо в насадку, после включения массажера: вода будет воздействовать на кожу лица, уменьшая количество внутритканевой жидкости. Под этим действием процесс естественного старения кожи будет замедлен.

Целенаправленный подводный массаж (фото. №2)

Эта насадка разработана для целенаправленного, более эффективного действия на точки тела с избытком жира, где кожа имеет характерный, непривлекательный вид (целлюлит). Обычно этому, прежде всего, подвержены бедра, части туловища и верхние части рук. Массаж с этой насадкой помогает растворять жировые отложения, позволяя эпидермису восстановить упругость и эластичность, а также предотвратить растягивание кожи. Зоны, где имеет тенденция накапливаться избыточная жировая

